



(BG) Процедура

1. Преди процедурата по тестване, всички тествови материали трябва да бъдат на стайна температура между 20-30°C. Не отваряйте пакетчето преди да сте готови да започнете.
2. Извадете тествовата лентичка от защитната опаковка.
3. Потопете тествовата лентичка в купичката с урина по посоката на изобразената стрелка. Не потапяйте по-дълбоко от нагниса „MAX“.
4. Прочетете резултатите между 3 и 5 мин след потапянето. Резултати 8 минути след потапянето ще бъдат невалидни.



Разчитане на резултатите

Негативен Позитивен




Невалиден



(DE) Verfahren

1. Vor der Testdurchführung sollten alle Testmaterialien eine Raumtemperatur von 20-30 °C haben. Öffnen Sie die Packung erst, wenn Sie bereit sind, damit zu beginnen.
2. Nehmen Sie den Teststreifen aus der Schutzverpackung.
3. Tauchen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in den Urinbecher ein. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als bis zur Markierung "MAX" ein.
4. Lesen Sie die Ergebnisse zwischen 3 und 5 Minuten nach dem Eintauchen ab. Ergebnisse, die 8 Minuten nach dem Eintauchen ermittelt werden, sind ungültig.

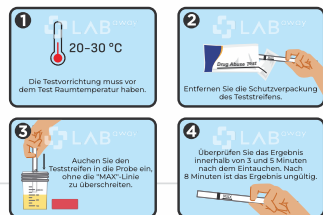

Auswertung der Ergebnisse

Negativ



Positiv




Ungültig



(EN) Procedure

1. Before the testing procedure, all test materials should be at room temperature between 20-30 °C. Do not open the package before you are ready to start.
2. Remove the test strip from the protective packaging.
3. Dip the test strip into the urine cup in the direction of the arrow shown. Do not dip deeper than the "MAX" marking.
4. Read the results between 3 and 5 minutes after immersion. Results 8 minutes after immersion will be invalid.

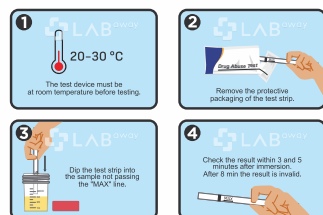

Interpretation of results

Negative



Positive




Invalid



(FR) Procédure

1. Avant la procédure d'essai, tous les matériaux d'essai doivent être à température ambiante, entre 20 et 30 °C. N'ouvrez pas l'emballage avant d'être prêt à commencer.
2. Retirez la bandelette réactive de son emballage de protection.
3. Plongez la bandelette réactive dans le gobelet à urine dans le sens de la flèche indiquée. Ne plongez pas la bandelette plus profondément que le marquage "MAX".
4. Lire les résultats entre 3 et 5 minutes après l'immersion. Les résultats obtenus 8 minutes après l'immersion ne sont pas valables.

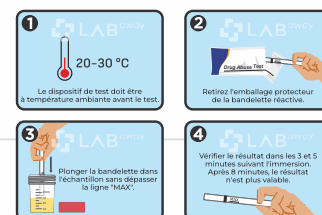

Interprétation des résultats

Négatif



Les résultats sont positifs




Non valide



(ES) Procedimiento

1. Antes del procedimiento de ensayo, todos los materiales de ensayo deben estar a temperatura ambiente entre 20-30 °C. No abra el paquete antes de estar listo para comenzar.
2. Extraiga la tira reactiva del embalaje protector.
3. Sumerja la tira reactiva en el recipiente para orina en la dirección de la flecha indicada. No sumerja más allá de la marca "MAX".
4. Lea los resultados entre 3 y 5 minutos después de la inmersión. Los resultados obtenidos 8 minutos después de la inmersión no serán válidos.

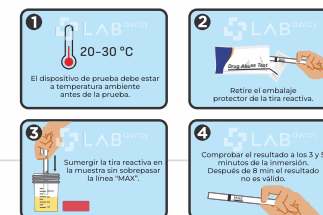

Interpretación de los resultados

Negativo



Positivos



No válido



MANUFACTURER

Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.
369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone,
Qingdao Shandong, 266112, China

DISTRIBUTER

„Gryphone Health Solutions EOOD
30, Ekzarh Yosif str.
1000 Sofia
Bulgaria
Contact: +359 882 399 001
office@lab-away.com

Please check the instructions before using. Not reusable.
Store between 4 - 30° C



www.lab-away.com